



MEDIAWEL30®

Zwiększ swoją

Wydajność

Jakość

Identyfikowalność

PARAMETRY



2,5 do 30 litrów



30-125°C + 0,5°C



60-90 minut

MEDIAWEL®

Pokrywa bezpieczeństwa
(blokowana powyżej 80°C)



Dwukierunkowa filtracja
(zapobieganie kontaminacji)

Podwójne monitorowanie
ciśnienia



Duże mieszadło
(szeroki zakres lepkości)

Koła medyczne



Kolorowe alarmy wizualne

7" ekran dotykowy LCD
(Intuicyjny wyświetlacz)



Korpus odporny na wstrząsy
(plastik ABS PC)

Dolny właz
(łatwe czyszczenie komory)



CONNECTED
MICROBIOLOGY



MEDIAWEL30®

Zwiększ swoją

Wydajność

Jakość

Identyfikowalność




Zapytaj o listę !

alliance-bio-expertise.com

**ALLIANCE BIO EXPERTISE
SZEROKI ZAKRES POŻYWEK**

ULATWIENIE

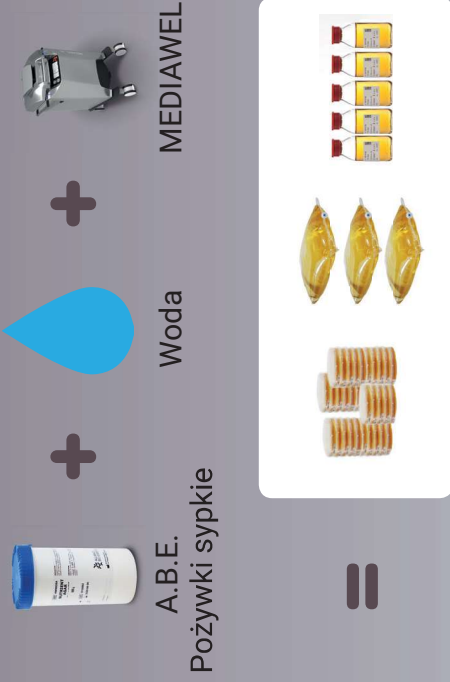


JAKOŚĆ POŻYWEK


- Kontrolowana temperatura = doskonała sterylność = doskonała żywność → dokładność ustawionej temperatury ± 0,5°C
- Płynna homogenizacja
- Duże płynnie pracujące mieszadło (1807 cm²) dla większej jednorodności. Powolne mieszanie (9 regulowanych prędkości 20 - 110 obr. / min.) w celu uniknięcia bąbelków powietrza
- Mniej czynności = mniejsze zanieczyszczenie

PRZYGOTOWANIE POŻYWEK « WSZYSTKO W JEDNYM »

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

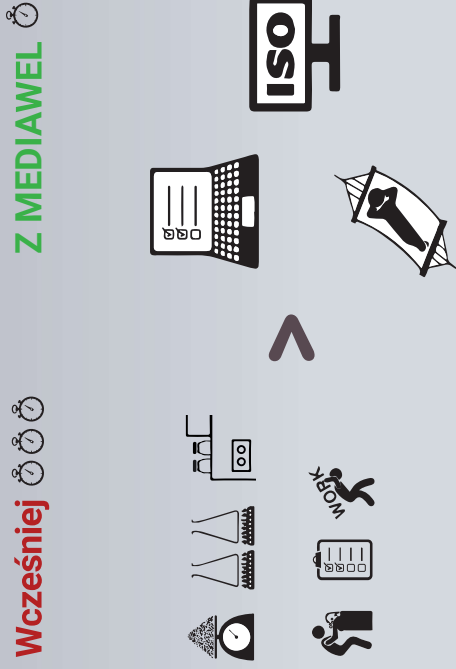

UNIWERSALNY

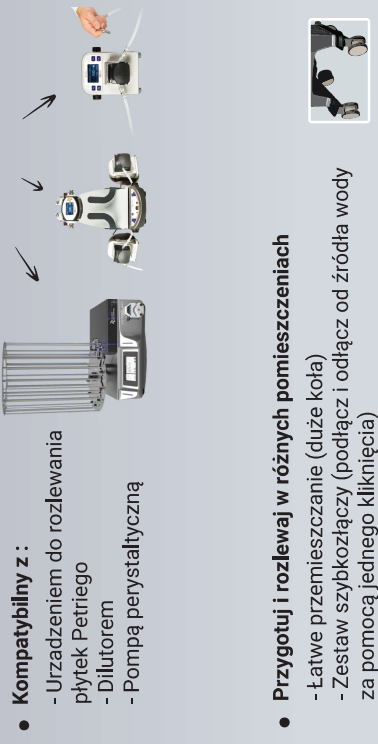




MEDIAWEL30®

**Zwiększ swoją
Wydajność**
Jakość

Identyfikowalność

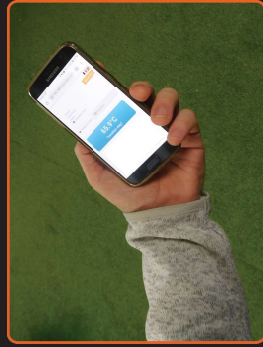


**Ciesz się możliwością podglądu
parametrów urządzenia za
pomocą smartfону!**

—CONNECTED—
MICROBIOLOGY

IDENTYFIKOWALNOŚĆ Z TWOIM MEDIAWEL®


Każdy cykl jest eksportowany (PDF / CSV) przez USB :

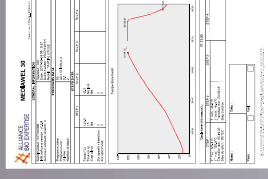


MONITOROWANIE DANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

Poprzez wi-fi / Ethernet, podłączenie do komputera / smartfona / tabletu

Panel sterowania / status on line urządzenia MEDIAWEL (aktualna temperatura, wykres temperatury, ustawienia programu, minimalna i maksymalna temperatura, alarmy i powiadomienia)

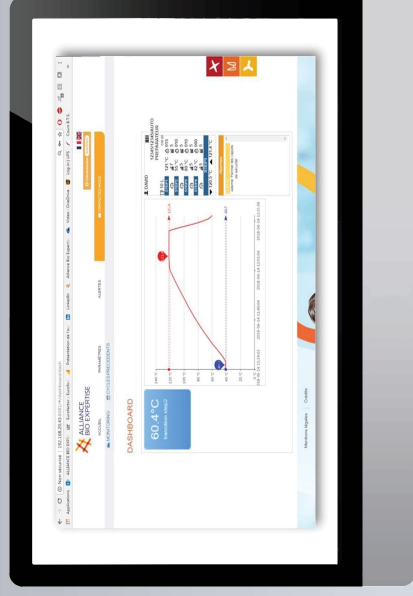

Cykle są automatycznie zapisywane i lokalnie przechowywane *. Przeglądaj je kolejno sortując wg numeru partii, daty, użytkownika.

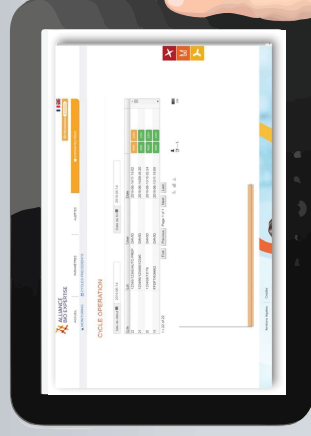

*Zawiera kartę pamięci SD 16GB – zapamiętuje do 10 000 cykli

FUNKCJE

Objętość przygotowywanych pożywek	Od 2,5 do 30 l
Temperatura sterylizacji	95 - 125°C
Czas sterylizacji	Od 1 do 99 min
Rozkład temperatury	Od 25°C do 80°C
Precyzja zadanej temperatury	± 0,5°C po ustabilizowaniu temperatury
Niewykorzystana część pożywki	< 130 ml
Nasadka dozująca	Tak. Do dodawania krwi i antybiotyków
Kraj produkcji	Francja
Identyfikowalność	Wbudowany moduł E-TRACE (4 porty USB / 1 port dla Ethernet / WIFI) Pełne monitorowanie danych (pliki PDF / CSV)
Kontrola temperatury	2 sondy temperatury (1 w opcji) + 2 wewnętrzne sondy regulujące
Monitorowanie ciśnienia	2 czujniki
Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia	Zawór bezpieczeństwa
Port dozujący	Adaptory dla 17mm, 12mm i 6,4mm
Płynna homogenizacja	Duże płynnie pracujące mieszadło (1807 cm ³) dla większej jednorodności. Powolne mieszanie (9 regulowanych prędkości 20 - 110 obr. / min) w celu uniknięcia bąbelków powietrza.
Wyświetlacz	7" ekran dotykowy LCD 800x420 pikseli
Alarmy	Optyczne (różne kolory)
Czyszczenie	Dolny wąż, łatwe czyszczenie komory
Łatwość transportu	4 duże koła medyczne
Wytrzymałość	Korpus odporny na wstrząsy (plastik ABS PC)
Zapisane programy	50

WYMIARY I ZASILANIE

Szerokość x wysokość x głębokość	585 x 1053 x 735 mm
Zasilanie	400V – 50/60Hz – 17A lub 230V – 50/60Hz – 22A (faza)
Moc	9000 W