

Poznaj Promocje miesiąca – Lipiec 2021 !

easySpiral Dilute



Zasady metody Spiral®: Próbkę nanoszona jest na powierzchnię obracającej się płytki Petriego za pomocą precyzyjnie odmierzającej mikropompy, zgodnie z zasadą logarytmicznie malejącej spirali Archimedesesa, od centrum do brzegu płytki. Odpowiednio do ustawień, posiew odpowiada 3 lub 4 rozcieńczeniom wykonywanym tradycyjną metodą. Nanoszona objętość jest ściśle określona i znana w każdym punkcie płytki Petriego. Po inkubacji kolonie widoczne są na powierzchni płytki w postaci spiralnego śladu. Liczenie może być wykonane manualnie za pomocą siatki lub Scan® 100, lub automatycznie z zastosowaniem liczników kolonii takich jak interscience Scan® 300, Scan® 500, Scan® 1200 lub Scan® 4000.

easySpiral Dilute® jest urządzeniem 2 w 1:

automatycznie wykonuje szereg rozcieńczeń i posiew. Umożliwia wykonanie serii rozcieńczeń 5 x 1/10 i automatycznego posiewu na jednej płytce Petriego, z policzalnym zakresem 30 do 1x10¹² jtk/mL.

Zalety:

- Prostota w obsłudze dla standardowych rozcieńczeń i posiewów
- Wykonywanie dowolnej liczby rozcieńczeń
- Szybkość: dezynfekcja, 5 rozcieńczeń i 1 posiew w 134 sek.
- 50 % oszczędności czasu i materiałów zużywalnych

414-000 - easySpiral Dilute, do wykonywania rozcieńczeń i posiewu Spiral® z portem USB

Cena promocyjna: **92726,31 PLN**

Homogenizatory



BagMixer® 400, najlepiej sprzedająca się na świecie seria, to wydajne homogenizatory o pojemności 400 mL do analiz mikrobiologicznych. Homogenizacja każdego rodzaju próbek do 40 g.

- 021-230 Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 P
Cena promocyjna: **6922,38 PLN**
- 022-230 Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 W
Cena promocyjna: **8324,31 PLN**
- 024-230 Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 CC
Cena promocyjna: **11286,69 PLN**
- 025-000 Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 S
Cena promocyjna: **13770,00 PLN**
- 025-100 Homogenizator laboratoryjny BagMixer® 400 SW
Cena promocyjna: **16686,00 PLN**



JumboMix® 3500 umożliwia szybkie rozdrobnienie dużych próbek do 375g, pojemność do 3500ml, w wielu zastosowaniach mikrobiologicznych.

- 031-230 Homogenizator laboratoryjny JumboMix® 3500 P CC
Cena promocyjna: **33297,23 PLN**


Liczniki kolonii



Scan® 100 jest manualnym licznikiem kolonii wyposażonym w system oświetlenia LED i ergonomiczne oparcie dla dłoni. Technologia ciemnego pola zapewnia pośrednie, dokładne i kontrastowe oświetlenie kolonii. Zainstalowany port USB zapewnia bezbłędny eksport wyników do komputera bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania.

435-000 Scan® 100 Manualny licznik kolonii

Cena promocyjna: **4860,00 PLN**

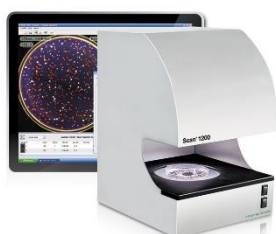

Scan® 1200, automatyczny licznik kolonii wysokiej rozdzielczości, umożliwia przystosowanie do wszystkich mediów stosowanych w laboratorium. Komfort użytkowania i dokładne, doskonale powtarzalne i automatycznie zapisywane wyniki.

437-000 - Scan® 1200 Automatyczny licznik kolonii i czytnik stref zahamowania

Cena promocyjna: **45546,92 PLN**



Scan® 4000 jest automatycznym licznikiem kolonii o obrazie ultra HD i czytnikiem stref zahamowania. Dostosowany do wszystkich rozmiarów płytek Petriego i pożywek. System oświetlenia wysokiej jakości gwarantuje wygodę użytkowania, wysoką dokładność oraz doskonałą powtarzalność.

438-000 - Scan® 4000 Automatyczny licznik kolonii i czytnik stref zahamowania

Cena promocyjna: **67043,08 PLN**

Czas trwania promocji do 30.09.2021r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o odpowiedź na maila z treścią "OFERTA" lub prosimy o kontakt bezpośredni:

tel. [+48 515 034 363](tel:+48515034363)

e-mail: argentalab@argenta.com.pl